


IKA

designed for scientists

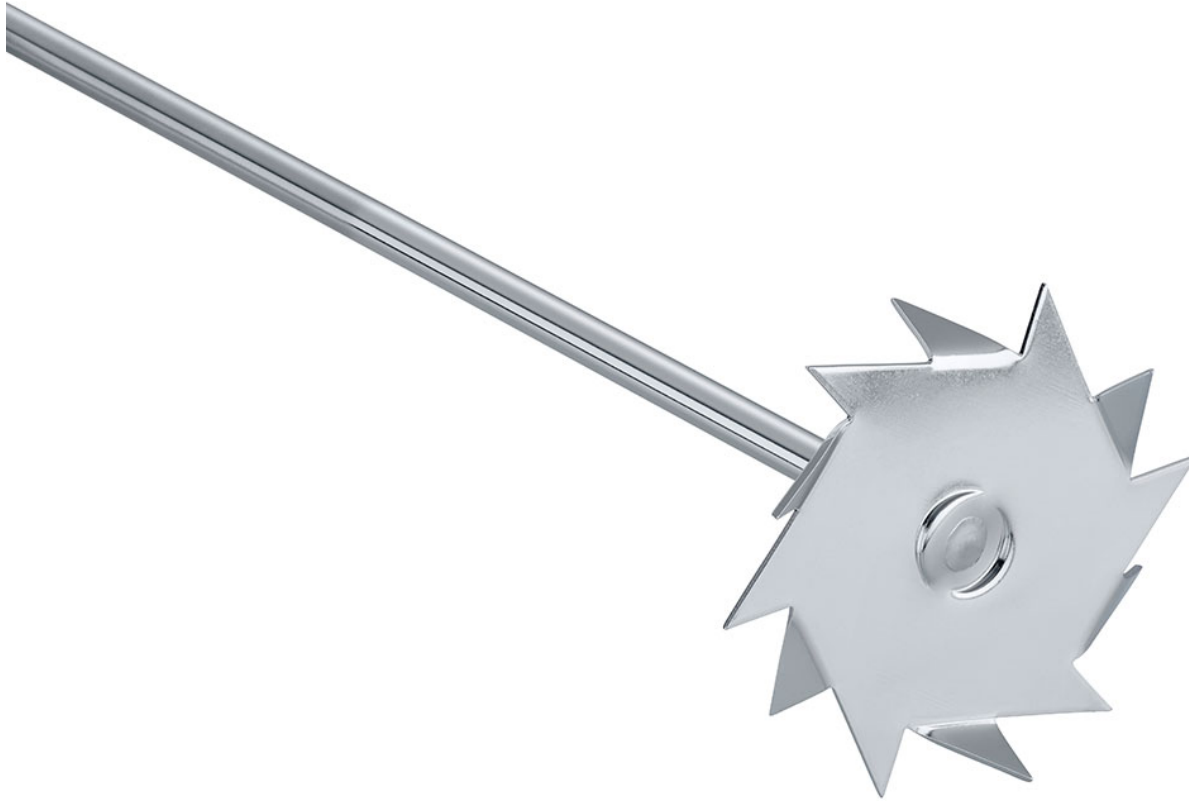

R 1300 Varillas agitadoras de disco de disolución

/// Hoja de Datos

El flujo es radial y el material de mezcla se succiona por arriba y por abajo. Alta turbulencia, altas fuerzas de cizallamiento, trituración de partículas. Se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	80
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	2000
Material en contacto con producto	AISI 316L
Peso [kg]	0.181
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

