




designed for scientists

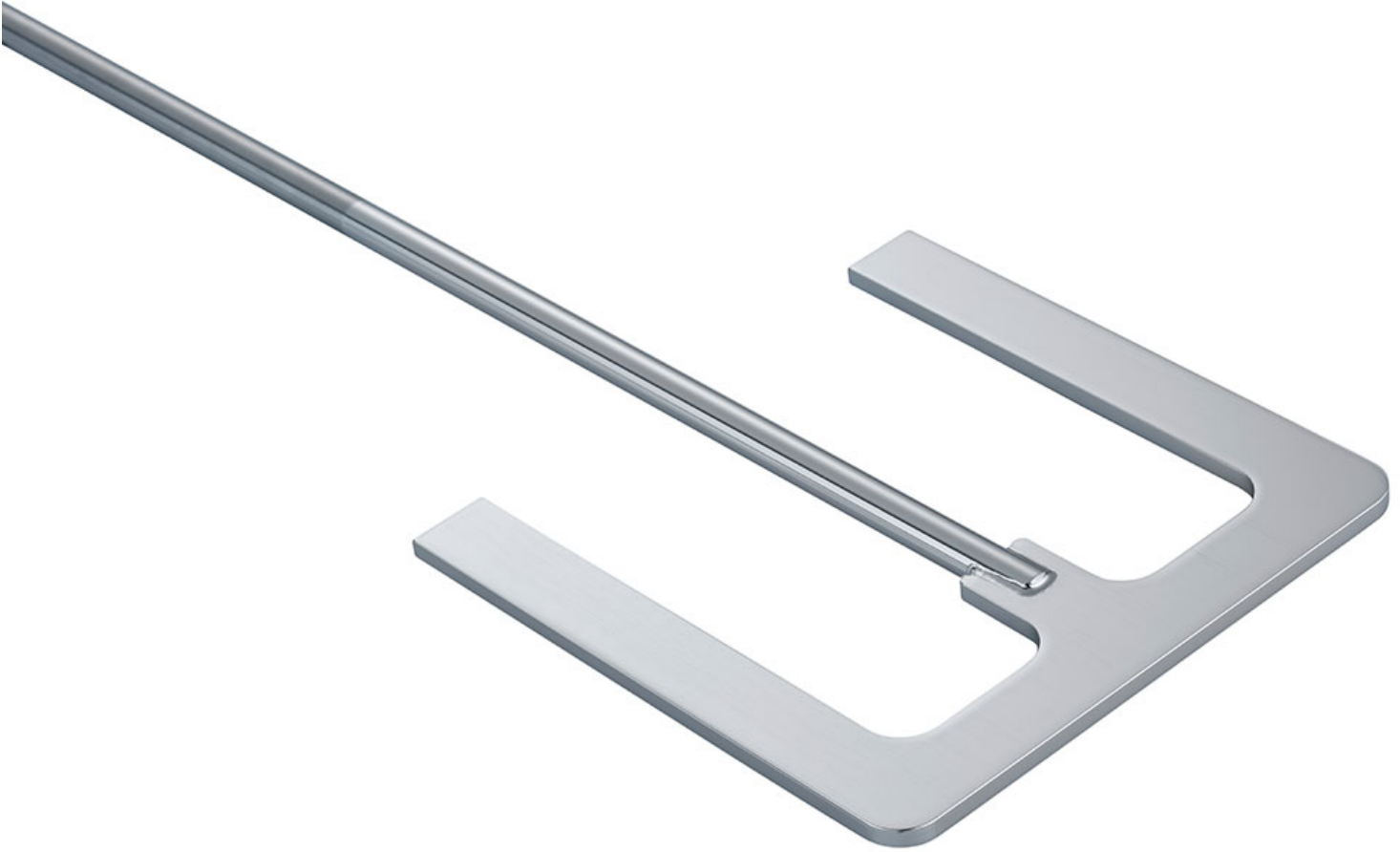

R 1333 Varillas agitadoras de áncora

/// Hoja de Datos

Corriente tangencial, alta tasa de cizallamiento en la zona marginal, pocas precipitaciones en la pared del recipiente. Se usa para velocidades bajas. Reacciones de polímeros, distribución homogéneas de fracciones minerales en los fluidos. Agitador ideal para fluidos de una viscosidad entre media y alta.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	150
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	550
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.638
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

