


IKA

designed for scientists

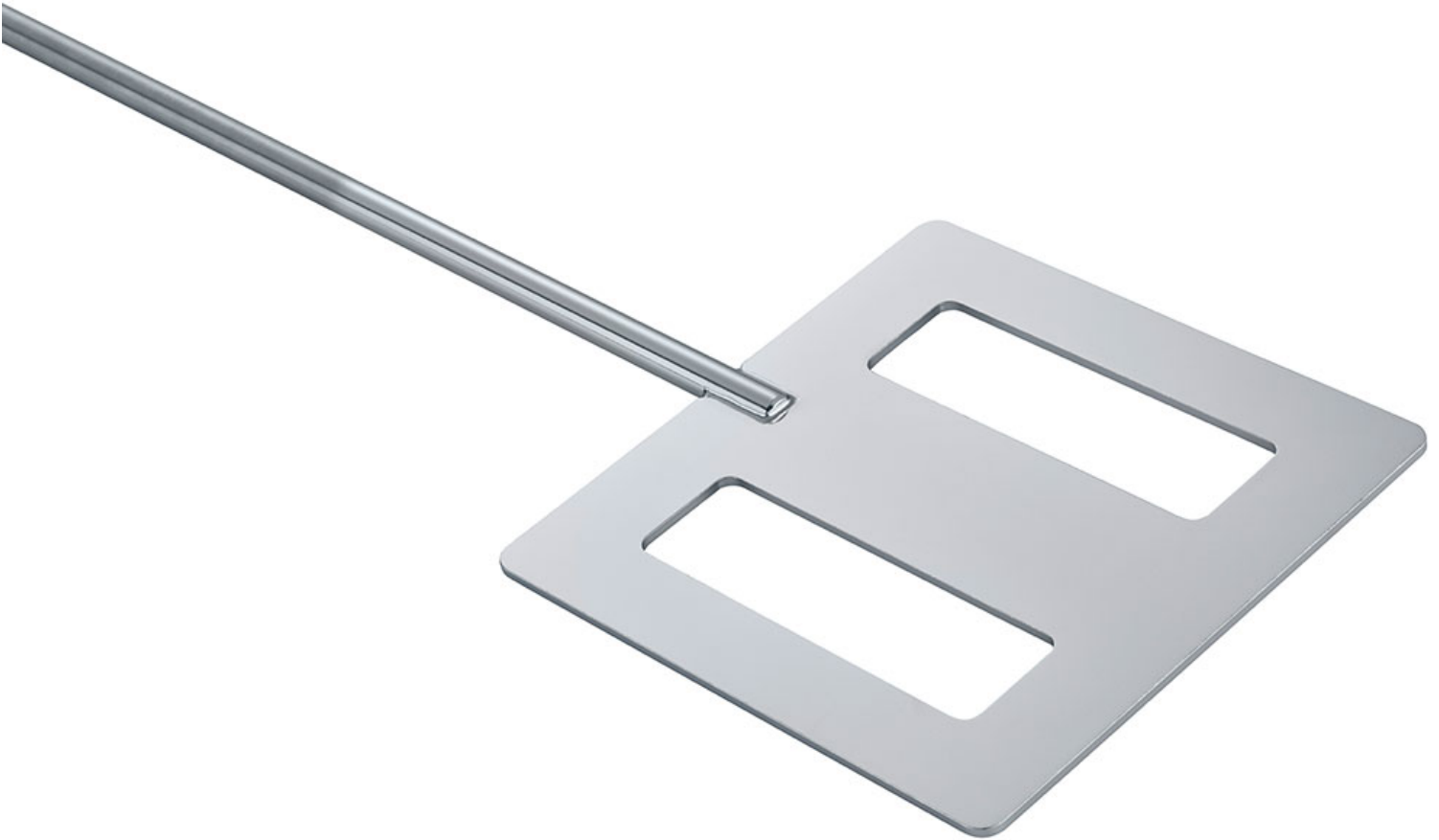

R 1376 Varillas agitadoras de pala

/// Hoja de Datos

Corriente tangencial, pocas turbulencias, buen intercambio de calor, tratamiento cuidadoso del producto. Se usa para velocidades entre bajas y medias.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	150
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	550
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.6385
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

