


IKA

designed for scientists

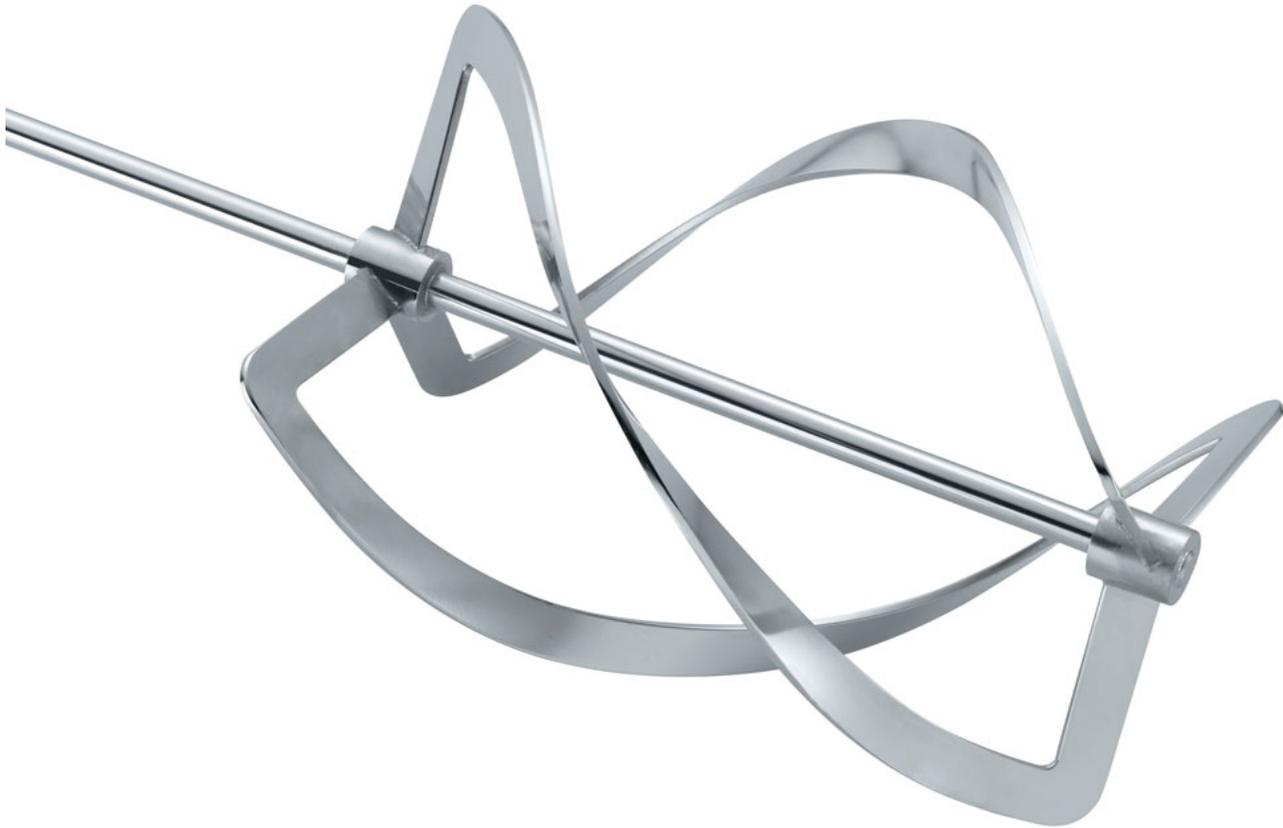

R 3003.2 Spiral stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo axial. El medio se transporta de abajo arriba. Para el mezclado homogéneo y el intercambio de calor de medios de viscosidad media a alta. Utilizado a velocidades bajas a medias.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	150
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Alto [mm]	244
Peso [kg]	1.045
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

