


IKA

designed for scientists

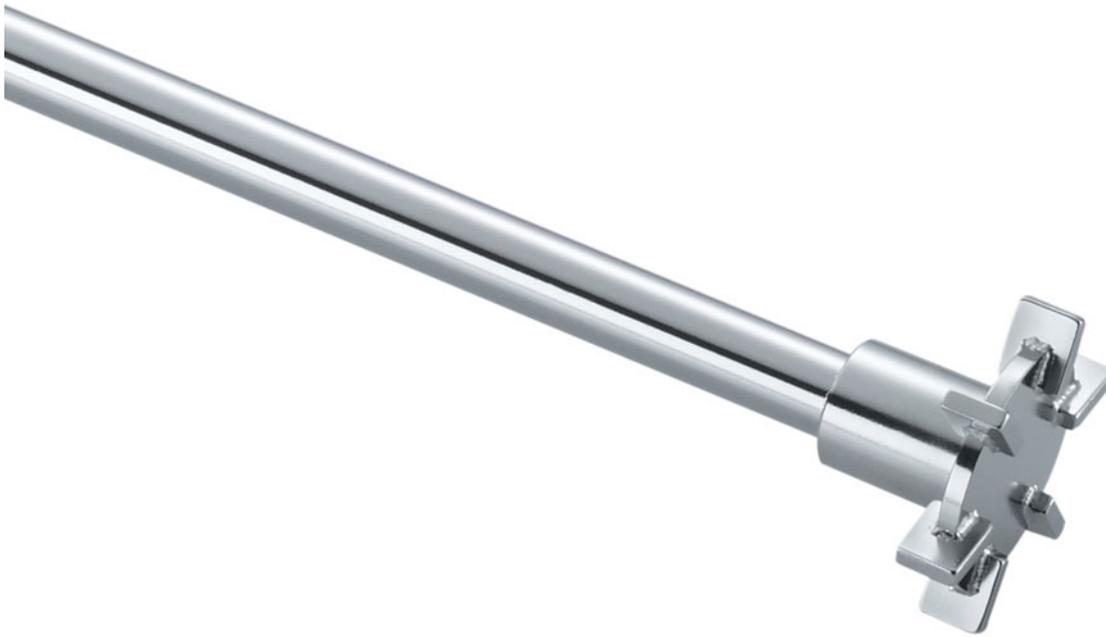

R 3004 Blade stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo radial. Para impulsar desde arriba y abajo el material mezclado. Para la gasificación de medios de baja viscosidad y para la homogeneización de sólidos en líquidos. Utilizado a velocidades medias a altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	30
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	359
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.156
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

