

Ficha de datos


Congelador de Laboratorio ZLN-T 200 Smart



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Ventajas del controlador SMART:

- pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- puertos LAN y USB para transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- alarma visual y sonora
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos
- manual de usuario para descarga directa
- cambio rápido de los parámetros del programa
- barra de alarma
- operación con los guantes puestos

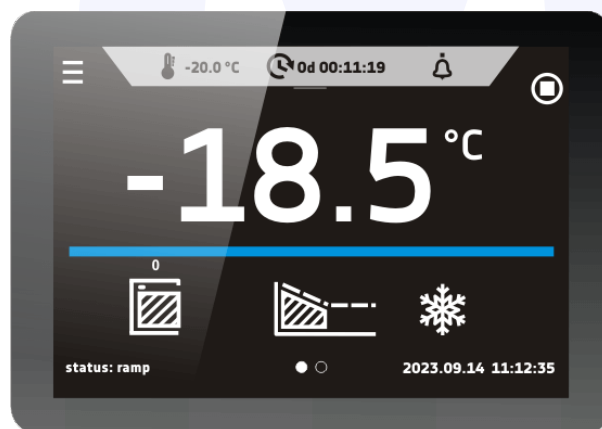

Smart - preview screen



DATOS TÉCNICOS

convección de aire	natural
capacidad de la cámara [l]	210
capacidad de trabajo [l]	180
controlador	microprocesador PID
pantalla	Pantalla táctil a todo color de 4,3"
tipo de aislamiento	espuma de poliuretano

TEMPERATURA

rango de temperatura [°C]	-40...0
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
fluctuación de temperatura a -20°C [±/°C]*	0,5
variación de temperatura a -20°C [±/°C]*	2,5
protección de temperatura	clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880 (opción)

CÁMARA

tipo de puerta	sólida
----------------	--------

interior

C Smart	acero inoxidable DIN 1.4016
CS Smart	acero inoxidable DIN 1.4016
P Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
PS Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301

gabinete


C Smart	con chapa de pintura
CS Smart	acero inoxidable pulido
P Smart	con chapa de pintura
PS Smart	acero inoxidable pulido

dimensiones totales [mm] /1/

ancho A	820
alto B	1380
profundo C	810

dimensiones internas [mm]

ancho D	450
ancho D'	520
alto E	770
profundo F	520
profundo F'	530

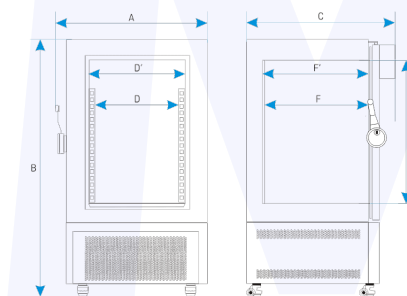

estantes (estándar max)	2 4
carga máxima por estante [kg] /2/	10
- estante reforzado (PW) [kg] /3/	50
carga máxima de la unidad [kg]	65
- equipo reforzado (W) [kg] /4/	130
peso [kg]	120



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230V 50-60Hz
potencia nominal [W]	450
gas refrigerante	R290 / GWP=3
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)


* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

** - otros tipos de alimentación bajo petición


- 1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
- 2 - en la superficie cargada de manera uniforme
- 3 - estante reforzado
- 4 - equipo reforzado

OPCIONES Y ACCESORIES

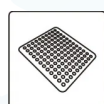


Número de orden: */PP

Un estante perforado

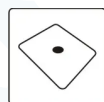


Número de orden: */PO

Estante con un agujero

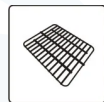

Número de orden: */PW

Estante reforzado

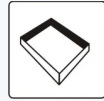

Número de orden: KUW GN*/*

Bandeja de acero inoxidable



Número de orden: */W

Versión reforzada




Número de orden: OWW/LED

Luz interior



Número de orden: LabDesk

Software LabDesk

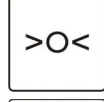

Número de orden: BRT*/L IQ/OQ/PQ

Calibración y cualificación IQ, OQ, PQ



Número de orden: */3.2

Protección de temperatura clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880



Número de orden: BPP 12


batería de respaldo para el controlador





Número de orden: PORT ALARM

puerto de alarma

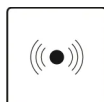

Número de orden: KD

control de acceso

