

## Ficha de datos


## Congelador de Ultra-Baja Temperatura ZLN-UT 200 VIP Smart PRO



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Ventajas del controlador SMART PRO:

- pantalla táctil grande y legible de 7 a todo color
- puertos LAN, USB y WiFi para comunicación y transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- un panorama general de datos en forma tabular y gráfica
- alarma visual y sonora
- función de administrador para la gestión
- inicio de sesión protegido con contraseña
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos con notificaciones de usuario
- software LabDesk y manual de usuario para descarga directa

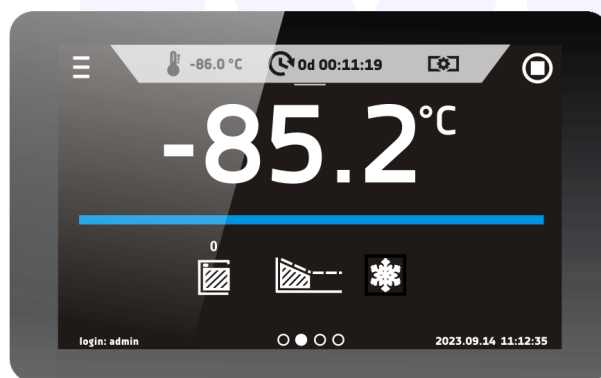

Smart PRO - preview screen



## DATOS TÉCNICOS

convección de aire	natural
capacidad de la cámara [l]	259
número de cajas 133x133x50mm (opción) [pza.]	192
controlador	microprocesador PID
pantalla	Pantalla táctil a todo color de 7"
tipo de aislamiento	vacío - paneles VIP

## TEMPERATURA

rango de temperatura [°C]	-86...-50
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
tiempo de enfriamiento de +20°C a -80°C [min]	160
tiempo de calentamiento en caso de fallo de alimentación de -80°C a -60°C [min]	50
fluctuación de temperatura a -80°C [±/°C]*	1,5
variación de temperatura a -80°C [±/°C]*	4,0

## CÁMARA

tipo de puerta	sólida
<b>interior</b>	
P Smart PRO	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
<b>gabinete</b>	
P Smart PRO	con chapa de pintura


## dimensiones totales [mm] /1/

ancho A	880
alto B	1390
profundo C	960

## dimensiones internas [mm]

ancho D	620
alto E	770
profundo F	580
alto G	360

estantes (estándar   max)	2/2
carga máxima por estante [kg] /2/	10
número de cámaras internas	2
carga máxima de la unidad [kg]	65
peso [kg]	200

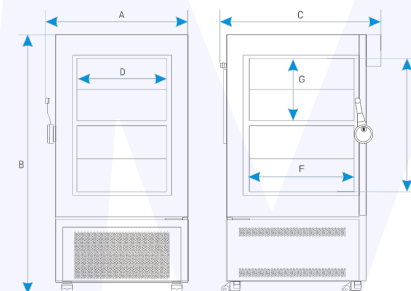

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230V 50-60Hz
potencia nominal [W]	2100
gas refrigerante	R290 / GWP=3   R170 / GWP=6
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

estos datos técnicos se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)

\* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

\*\* - otros tipos de alimentación bajo petición


1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm

### OPCIONES Y ACCESORIES




Número de orden: PORT ALARM

puerto de alarma

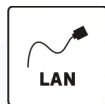

Número de orden: LANK

cable LAN

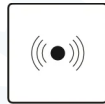


Número de orden: KD

control de acceso



Número de orden: ZLN-UT/CO2

sistema de emergencia de mantenimiento de temperatura CO<sub>2</sub>

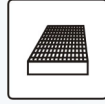

Número de orden: ZLN-UT/STP12 / 16

cajas de almacenamiento para viales



Número de orden: ZLN-UT/ST12 / 16

racks con cajones

