


Rotator HD

Agitador Rotatorio Digital



Con bombo 4 botellas

Agitador rotatorio digital,
controlado por microprocesador.

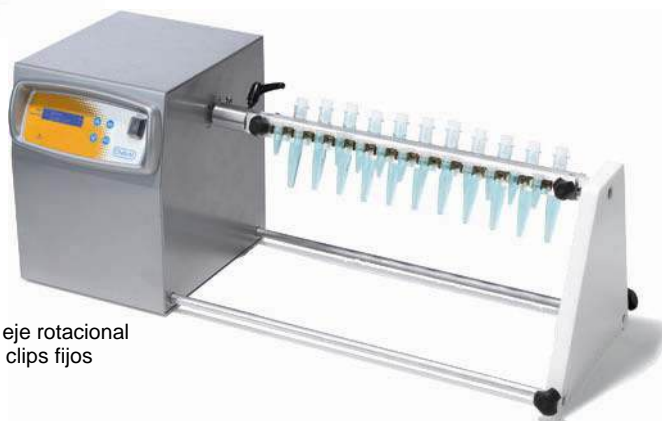

Con eje rotacional
para clips fijos

- Agitador rotativo digital fácilmente adaptable a varios accesorios para diferentes aplicaciones.
- Varios soportes intercambiables para acoplar y agitar: frascos, botellas, embudos de decantación, tubos de ensayo, tubos de cultivo, tubos Eppendorf, etc.
- Altura de soportes fácilmente ajustable.
- Velocidad regulable, controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de la velocidad y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en pantalla.
- Muy silencioso para funcionamiento continuo.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	R1-HDE	R2-HDE	R4-HDE	R6-HDE	R8-HDE	R10-HDE	R12-HDE	RT-HDE	RED-HDE	R-HDE
Referencia	10000-01075	10000-01076	10000-01077	10000-01078	10000-01079	10000-01080	10000-01081	10000-01082	10000-01083	10000-01063
Agitación										
Potencia (W)	80									
Movimiento	Rotación									
Rango vel. (rpm)	*5-40									
Resoluc. (rpm)	2									
Temporiz. (min)	0-120									
Datos Generales										
Accesorio incluido	Bombo 1 botella	Bombo 2 botellas	Bombo 4 botellas	Bombo 6 botellas	Bombo 8 botellas	Bombo 10 botellas	Bombo 12 botellas	Eje rotacional clips fijos	Bombo 3 embudos decant.	-
Dimens. (cm)	60x25x40	60x25x35	60x30x35	73x30x35	80x30x35	92x30x35	10,5x30x35	73x30x35	60x25x40	
Peso (kg)	8,0 (sin accesorio)									
Protección IP	IP54									

Accesorios	Referencia
Bombos :	
<i>para 1 botella, para mezcla de sólidos y líquidos</i>	20000-00030
<i>para 2 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00153
<i>para 4 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00080
<i>para 6 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00143
<i>para 8 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00144
<i>para 10 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00145
<i>para 12 botellas desde 1 hasta 2 L</i>	20000-00146
<i>para 3 embudos de decantación</i>	20000-00087
Varilla para bombo para botellas de 0,5L	20000-00184
Eje rotacional para acoplamiento de bases con clips fijos	20000-00058
<i>Base con clips fijos de sujeción 16 pinzas ø 6/7</i>	20000-00121
<i>Base con clips fijos de sujeción 14 pinzas ø 8/9</i>	20000-00122
<i>Base con clips fijos de sujeción 13 pinzas ø 10/11</i>	20000-00123
<i>Base con clips fijos de sujeción 12 pinzas ø 12/13</i>	20000-00124
<i>Base con clips fijos de sujeción 11 pinzas ø 14/15</i>	20000-00125
<i>Base con clips fijos de sujeción 11 pinzas ø 16/17</i>	20000-00126
<i>Base con clips fijos de sujeción 10 pinzas ø 18/19</i>	20000-00127
<i>Base con clips fijos de sujeción 9 pinzas ø 20/22</i>	20000-00128
<i>Base con clips fijos de sujeción 9 pinzas ø 22/24</i>	20000-00129
<i>Base con clips fijos de sujeción 7 pinzas ø 27/30</i>	20000-00130



* para otros accesorios especiales, consultar.

- Embalaje 10000-01063: 47x37x32cm + Bombos.